



LEVICS

Going further in ultrasonic aspiration

α alphacommed
MATÉRIEL MÉDICAL - VENTE & SAV

Söring

Söring

**Plus d'options
à votre disposition.**

Nous sommes les spécialistes dans le domaine de la résection et de la dissection de tissus par ultrasons. Basés en Allemagne, nous développons une technologie médicale utilisée dans le monde entier.

En mettant l'accent sur une expérience utilisateur intuitive et notre service personnel et direct, nous rendons les interventions chirurgicales plus simples, plus efficaces et plus sûres.

LEVICS garantit la précision chirurgicale en neurochirurgie, ainsi qu'une résection tissulaire efficace et uniforme.

Les géométries de sonotrodes conçues avec précision et les modes sélectionnables permettent un effet de résection optimisé selon la consistance des tissus.




**Fragmentation efficace des tumeurs
en neurochirurgie et préparation osseuse
contrôlée à proximité immédiate
des structures critiques en chirurgie
rachidienne.**



Instrument bien équilibré et léger pour
un maniement sûr lors d'interventions
chirurgicales de longue durée

La forme fine et courbée du corps
de l'instrument garantit une visibilité
optimale sur le champ opératoire

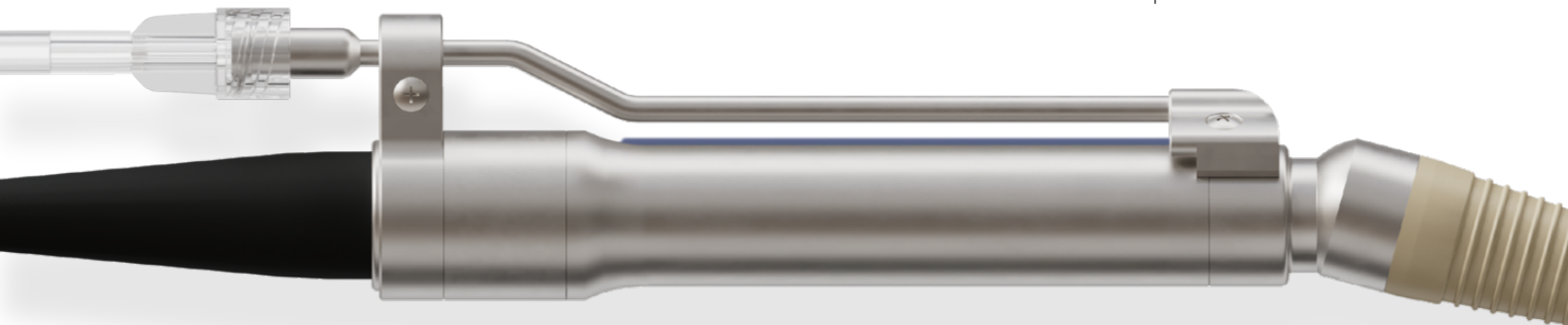

Assortiment de sonotrodes LEVICS améliorées

Large gamme de sonotrodes de longueurs, diamètres et géométries de pointes variés


Standard



Biseautée




Crantée

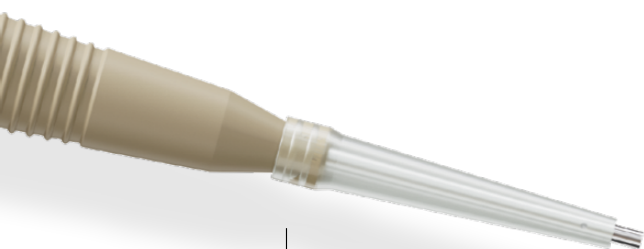


Excellente visibilité grâce
à une pulvérisation minimale

Sonotrode à lame pour des coupes
précises, sonotrode à râpe pour
une ablation précise

**Sonotrode
à lame**

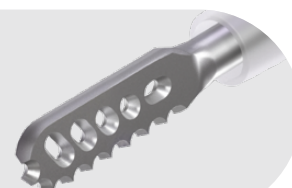


**Sonotrode
à râpe**

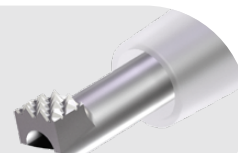


Haut niveau de sécurité et de contrôle lors de la résection à proximité des structures critiques et déroulement fluide des interventions en salle d'opération.

Le curseur Effect-Control permet à l'équipe médicale de procéder à des ajustements rapides et précis des réglages sur l'unité ultrasons. Cela favorise des interactions fluides.

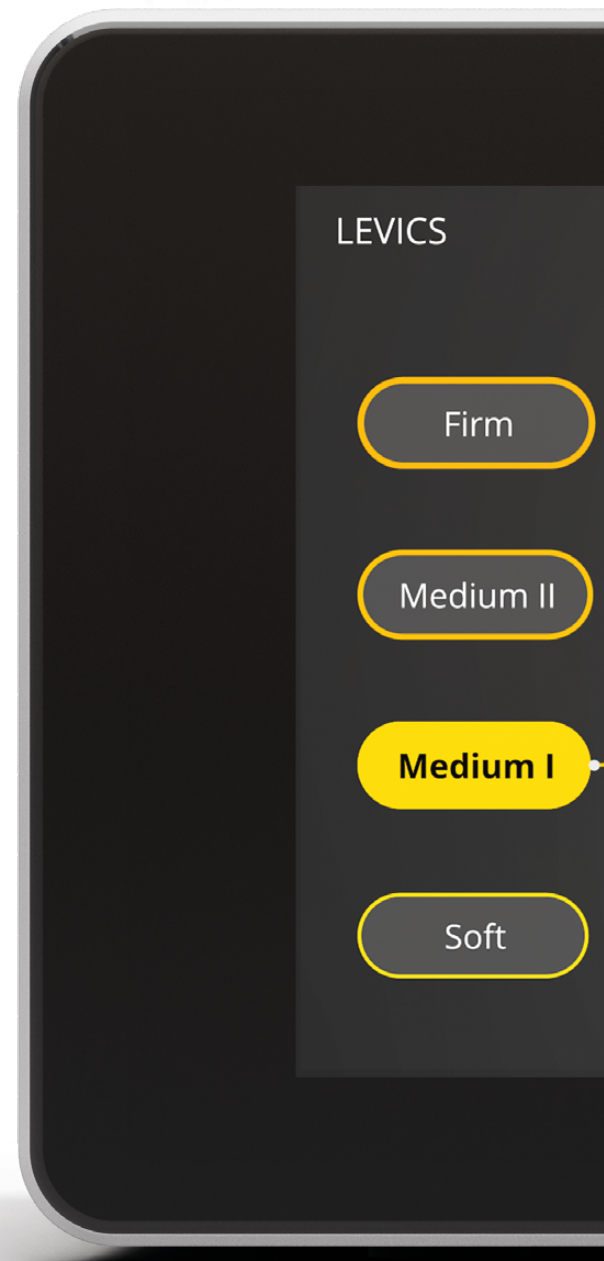

Le Safety Level augmente la sécurité et le contrôle sur les structures critiques en réduisant les trois paramètres de réglage.

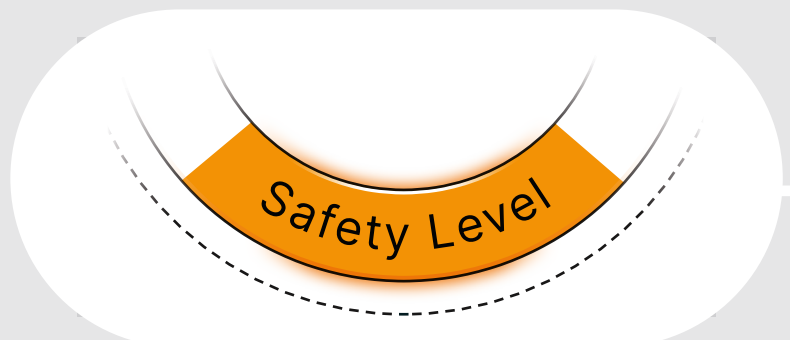



Le bouton sur la pédale de commande permet d'activer immédiatement le Safety Level en peropérateur.

Aperçu des éléments de commande de l'unité ultrasons : **Modes, Effect-Control et Safety Level**

Modes

Il existe quatre modes pour la neurochirurgie. Chaque mode contient uniquement des options de réglage adaptées à la consistance du tissu sélectionnée. Cela permet de trouver rapidement un réglage de départ approprié et tous les autres ajustements permettent d'obtenir des résultats de résection optimisés.

Firm

Medium II

Medium I

Soft

Pour la **chirurgie rachidienne**, il existe un mode (Standard) et cinq niveaux d'effet, ainsi qu'un Safety Level.

Standard



Effect-Control

Pour la consistance du tissu sélectionnée (mode), le taux de résection est adapté grâce à l'Effect-Control. Pour chaque mode, le réglage de départ est un taux de résection intermédiaire (niveau d'effet = 4). Pour un taux de résection plus élevé, on se servira du curseur Effect-Control (par ex. niveau d'effet = 9).

- Firm
- Medium II
- Medium I
- Soft



Safety Level

Avec le Safety Level, le taux de résection est fortement réduit et une limitation de la tension permet de procéder à la résection avec un haut niveau de sécurité. Le Safety Level peut être activé à l'aide d'une option sur l'écran tactile ou bien grâce à un bouton sur la pédale de commande.

Utilisation confortable pour l'équipe chirurgicale.

LEVICS et l'unité ultrasons offrent de nombreuses fonctionnalités pour une utilisation simple.

Enregistrement des préférences de réglage individuelles _____


Petites dimensions, poids réduit _____

Instructions de mise en service avec des images claires _____

Grand écran tactile avec un concept d'utilisation contemporain : Modes, Effect-Control et Safety Level _____



reddot winner 2025

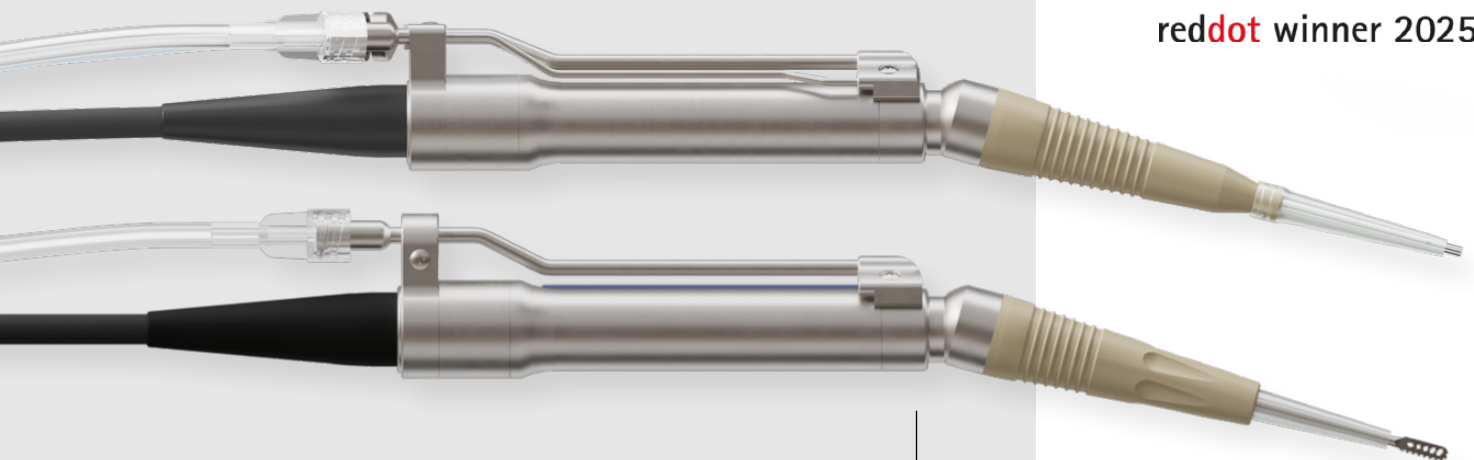

Instrument LEVICS pour la résection tumorale et instrument LEVICS, os pour une préparation osseuse de précision _____



Pompe d'aspiration
silencieuse et contrôlée
avec précision



Pédale de commande sans fil
avec bouton Safety Level





Double tuyau avec cassette de tuyau
pour un montage facile



Montage sécurisé et rapide
des sonotrodes


Montage avec cassette à tuyau
et préparation automatique

Les instructions illustrées vous guident étape par étape tout au long de la mise en service.

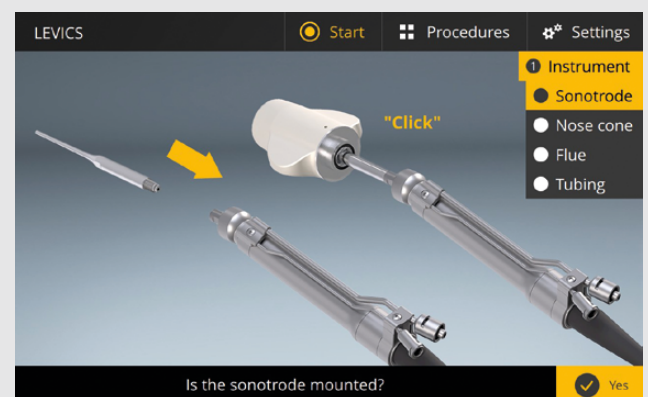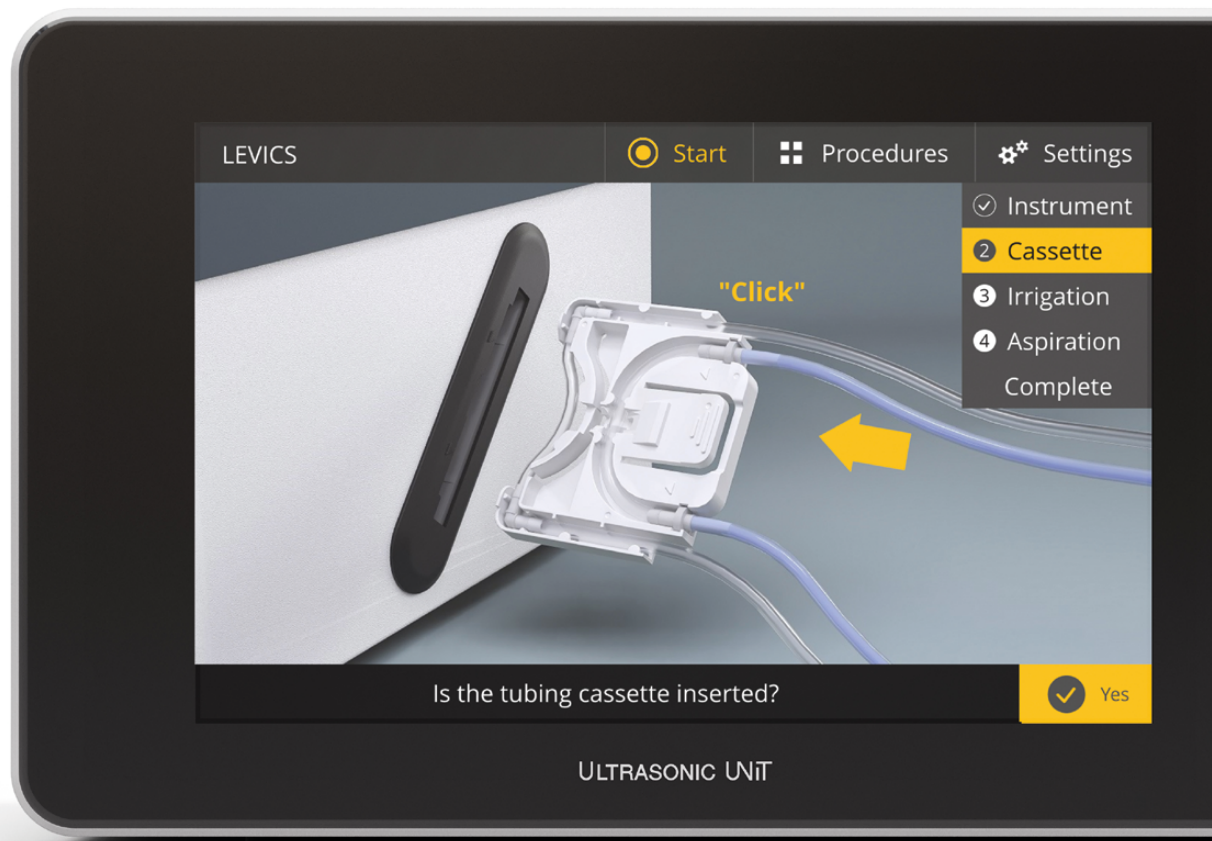

Instructions de montage de l'instrument

La mise en service intuitive et automatisée permet de gagner du temps et garantit une utilisation fluide

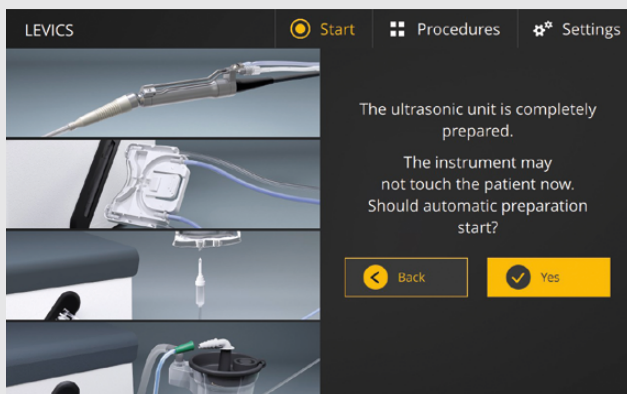

Préparation automatisée



Mémorisation des préférences de réglage individuelles

LEVICS, Instrument, pour SUU-900 _____



N° d'article	92-901
Étendue de la livraison	avec câble d'instrument fixe (longueur de 5 m)
Fréquence de travail	35 kHz
Technique d'entraînement	piézoélectrique
Livraison Retraitement	non stérile 150 cycles
Irrigation Aspiration	oui oui

LEVICS, Instrument, os, pour SUU-900 _____



N° d'article	92-950
Étendue de la livraison	avec câble d'instrument fixe (longueur de 5 m)
Fréquence de travail	35 kHz
Technique d'entraînement	piézoélectrique
Livraison Retraitement	non stérile 150 cycles
Irrigation Aspiration	oui non

LEVICS et Bone Instrument, Plateau d'instruments _____



N° d'article	616S0100
Dimensions	361 mm x 242 mm x 70 mm
Livraison Retraitement	non stérile retraitsable

Sonotrodes et cônes et accessoires LEVICS, compatibles avec 92-901

LEVICS sonotrode et cône _____



N° d'article	616K0051	616K0052
Longueur de travail de la sonotrode	36 mm	98 mm
Ø extérieur Ø intérieur de la sonotrode	2,0 mm 1,4 mm	2,0 mm 1,4 mm
Livraison Retraitement	stérile à usage unique	stérile à usage unique
Unité d'emballage	1 pièce	1 pièce

LEVICS sonotrode et cône _____



N° d'article	616K0053
Longueur de travail de la sonotrode	108 mm
Ø extérieur Ø intérieur de la sonotrode	2,3 mm 1,7 mm
Livraison Retraitement	stérile à usage unique
Unité d'emballage	1 pièce

**LEVICS sonotrode et cône,
crantée** _____



N° d'article	616K0054	616K0055
Longueur de travail de la sonotrode	37 mm	98 mm
Ø extérieur Ø intérieur de la sonotrode	1,9 mm 1,4 mm	2,0 mm 1,4 mm
Livraison Retraitement	stérile à usage unique	stérile à usage unique
Unité d'emballage	1 pièce	1 pièce

**LEVICS sonotrode et cône,
biseautée** _____



N° d'article	616K0056	616K0057
Longueur de travail de la sonotrode	37 mm	97 mm
Ø extérieur Ø intérieur de la sonotrode	1,9 mm 1,4 mm	2,0 mm 1,4 mm
Livraison Retraitement	stérile à usage unique	stérile à usage unique
Unité d'emballage	1 pièce	1 pièce

LEVICS clé dynamométrique _____

N° d'article	616K0006
Livraison Retraitement	non stérile 150 cycles



Double tuyau LEVICS, Luer, pour SUU-900 _____

N° d'article	700S0902-10
Livraison Retraitement	stérile à usage unique
Unité d'emballage	10 pièces



Jeux de sonotrodes et accessoires LEVICS, compatibles avec 92-950

Jeu de lames sonotrode _____



N° d'article	612K0057-SET-10	612K0058-SET-10
Longueur de travail de la sonotrode	36 mm	101 mm
Largeur de la lame longueur de la lame	0,8 mm 10 mm	0,8 mm 10 mm
Livraison Retraitement	stérile à usage unique	stérile à usage unique
Étendue de la livraison	Cône et clé dynamométrique	Cône et clé dynamométrique
Unité d'emballage	inclus	inclus
Unité d'emballage	1 pièce	1 pièce

Jeu de râpes sonotrode _____



N° d'article	612K0060-SET-10	612K0061-SET-10
Longueur de travail de la sonotrode	38 mm	100 mm
Surface de la râpe	4 mm ²	4 mm ²
Livraison Retraitement	stérile à usage unique	stérile à usage unique
Étendue de la livraison	Cône et clé dynamométrique	Cône et clé dynamométrique
Unité d'emballage	inclus	inclus
Unité d'emballage	1 pièce	1 pièce

Tuyau LEVICS, Luer, pour SUU-900 _____



N° d'article	700S0903-10
Livraison Retraitement	stérile à usage unique
Unité d'emballage	10 pièces



Unité ultrasons _____

N° d'article	SUU-900
Étendue de la livraison	un câble secteur, câble HF (1,5 m), un tuyau à vide pour le système d'aspiration de Medela, tuyau à vide pour un système d'aspiration universel de Serres, une pédale sans fil avec piles
Dimensions	460 mm x 195 mm x 420 mm
Poids	16 kg
Tension secteur	100 V à 240 V

Chariot _____

N° d'article	CU-900
Étendue de la livraison	avec support pour bocal d'aspiration, panier de rangement, support pour flacon d'irrigation
Poids	18 kg



Unité ultrasons et chariot

Söring GmbH
Justus-von-Liebig-Ring 2
25451 Quickborn
Allemagne

Tél.: +49 4106-6100-0
Pour plus d'informations, consulter : www.soering.com

Suivez-nous sur **LinkedIn**

03-7239e | R01.01 | 17.06.2026 | fr-FR

*Enregistrement nécessaire.

Les spécifications, la conception et les accessoires des produits peuvent être modifiés sans préavis.

Les produits peuvent ne pas être disponibles dans votre pays.

Pour plus d'informations, veuillez contacter votre partenaire Söring local.