


CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

STERILISATEURS GETINGE DE LA GAMME K		
Programmes standard		
Type de procédé	Programmes	Durée du procédé
Cycle B	134°C emballé	~25 min
Cycle B	121°C emballé	~39 min
Cycle B	134°C textile	~29 min
Cycle B	134°C prion	~38 min
Cycle S	134°C dental special*	~15 min
Cycle N	134°C flash	~9 min
Programmes de test : Bowie & Dick, test de fuite		

* Pour 10 pièces à main dentaires emballées maximum.

Programmes optionnels		
Cycle liquide	121°C liquide	~90 min
Défini par client	121°C - 134°C	

La durée des cycles dépend de la charge et est donnée à titre indicatif. Elle correspond à un traitement complet, séchage compris, en charge moyenne. Pour plus de détails, reportez-vous aux spécifications du produit.

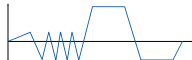

Procédé B (schéma)



Procédé N (schéma)




Procédé S (dental special)

Electricité
monophasé, 230 V, 10 Amp.

Niveau sonore
<60 dB

Validation

Les stérilisateur sont équipés de raccords pour les capteurs de température et de pression externes indépendants pour la validation, conformément à la norme EN554 et ISO17665 par exemple.

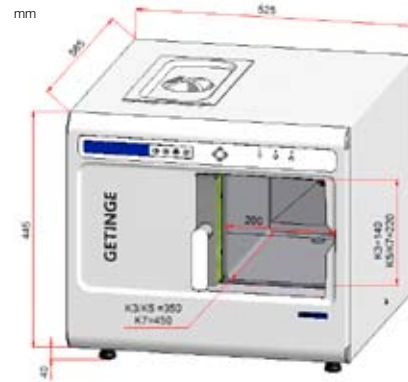

Volume de la chambre : / Charge max. (textiles) :

K3+ = 10 L / 3 kg (1,5 kg)

K5+ = 15 L / 5 kg (2,5 kg)

K7+ = 20 L / 7 kg (3,5 kg)

Raccordements à l'eau et conditions requises

Qualité de l'eau : distillée ou déminéralisée, max. 30 µS/cm

Consommation d'eau : environ 0,4 L/cycle

Volume du réservoir : 5 litres

Pression de l'eau : au moins 1,0 bar lorsque l'appareil est raccordé à l'alimentation en eau

Filtre de déminéralisation DS200

Capacité à 200 ppm : environ 520 litres

Montage mural.

Traçabilité

Par l'intermédiaire d'une imprimante, d'une unité de stockage USB ou d'un port série pour PC.



ACCESSOIRES



Une sélection d'accessoires pour les stérilisateur Getinge de la gamme K

1. Plateaux, 380x190x38 mm, 330x190x38 mm ou 100x190x38 mm
2. Supports pour cassette
3. Unité de stockage USB
4. Déminéralisateur DS200 pour le raccordement à une arrivée et à une évacuation d'eau
5. Support pour sachets (afin de faciliter le séchage des articles) / Poignée du plateau

6. Cassette dentaire, complète avec couvercle et mécanisme de fixation, 287x186x39 mm
7. Imprimante

Il existe de nombreux autres accessoires pour les stérilisateur Getinge de la gamme K. Consultez la brochure séparée. Consultez le site www.skarhamn.getinge.com ou demandez des informations à votre revendeur Getinge le plus proche.