


# HIGH-SPEED STERILIZATION™

## QUI ALLIE CAPACITÉ ET EFFICACITÉ



Les stérilisateurs Getinge de la gamme K sont des modèles de table exceptionnellement rapides et dotés d'une grande capacité. En fait, un seul stérilisateur fait le travail de deux ! En 25 minutes, vous pouvez stériliser jusqu'à 10 plateaux à l'aide du programme du cycle B. Cela équivaut à 20 plateaux par heure. Et si vous n'avez besoin que d'un programme Flash pour des instruments non emballés, cela ne prend que 9 minutes ! Cela signifie que la rotation des instruments est plus rapide et que le nombre d'instruments nécessaires à votre clinique est réduit de manière considérable.

**Les stérilisateurs Getinge de la gamme K** disposent de chambres rectangulaires qui utilisent presque toute la totalité du volume lors de la stérilisation des plateaux et des cassettes. Dans une chambre ronde, 25% du volume représente de l'espace perdu. Lorsqu'il s'agit de comparer la capacité en plateaux, le volume en litre n'est pas forcément déterminant.

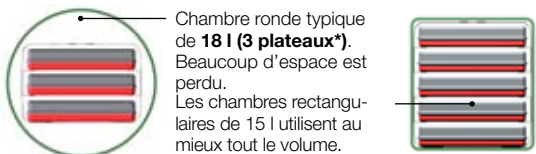

Chambre ronde typique de **18 l (3 plateaux\*)**. Beaucoup d'espace est perdu. Les chambres rectangulaires de 15 l utilisent au mieux tout le volume.

### Jusqu'à 10 ans de garantie

Nous fabriquons des stérilisateurs depuis plus de 50 ans ; par conséquent, nous connaissons bien les performances remarquables de nos machines. C'est pourquoi Getinge peut proposer des garanties, elles aussi, exceptionnelles : garantie générale de deux ans, garantie de cinq ans sur la pompe du système d'aspiration et garantie de dix ans sur la chambre et les éléments chauffants du générateur de vapeur.



### Cycle B éprouvé

La norme EN13060, en application depuis septembre 2004, est la norme européenne pour les petits stérilisateurs, qui exige que ceux-ci puissent stériliser sous vide, selon le procédé B, des instruments creux, emballés et des textiles. Les stérilisateurs Getinge de la gamme K répondent à ces critères depuis 1989.

\* Plateau ou cassette dentaire, 38 mm de haut.

### Porte coulissante sécurisée

Saviez-vous que les portes de stérilisateurs sont soumises à une pression d'une tonne? Sur les portes de stérilisateurs conventionnelles, cette pression considérable est supportée par des charnières et des verrous. Les stérilisateurs Getinge de la gamme K proposent une solution plus sûre, à savoir une porte coulissante intégrée dans des rails robustes.

Cette conception protège également l'utilisateur de tout contact avec la surface intérieure chaude de la porte et permet de pallier les problèmes d'ouverture de la porte lorsque (comme c'est souvent le cas) l'espace devant le stérilisateur est limité.

### Facilité d'emploi et d'entretien

La convivialité et la simplicité de la maintenance sont d'autres avantages importants des stérilisateurs Getinge de la gamme K :

- Simplicité d'utilisation : il suffit de charger le stérilisateur, de fermer la porte et d'appuyer sur le bouton « Marche ».
- Maintenance aisée et peu onéreuse grâce à une conception unique basée sur un nombre limité de composants.
- Réservoir d'eau en acier inoxydable facilement accessible pour le nettoyage, ce qui permet d'éviter toute formation de biofilm non hygiénique.
- Faible consommation d'eau déminéralisée – juste 0,4 litre pour un cycle standard.
- Raccordement simple à l'alimentation en eau.
- Cycle de documentation par l'intermédiaire d'une imprimante, d'une unité de stockage USB ou d'un port série pour PC.

### Des modèles adaptés à tous les besoins

Les stérilisateurs Getinge de la gamme K sont répartis en trois modèles dont les profondeurs de chambre et les capacités de chargement diffèrent. Que vous ayez une clinique ou un petit cabinet dentaire, il existe un modèle qui vous convient.